

Sistema de blanqueamiento dental LED IDEALSKIN



Nuestra bandeja bucal para blanquear los dientes con luz led. adopta una tecnología especial de luz fría, combinada con boquilla y luz fría de alta intensidad. Blue ray reacciona con los dientes profesionales gel blanqueador, que puede eliminar eficazmente el manchas en la superficie del diente.

La boquilla blanda está diseñada en base a los principios de la ingeniería oral humana. Usted se sentirá más cómodo en el curso del proceso de blanqueamiento. Cuando te muerdes la boca, se ajustará completamente y cubrirá sus dientes.

Antes de iniciar su tratamiento, es muy importante que sepa cómo funciona y qué necesita estar preparado. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente.



CÓMO UTILIZAR

- 1.** Seque los dientes y enjuague la boquilla antes de usarla.
- 2.** Mírate al espejo para registrar en qué etapa te encuentras. papel guía de colores.
- 3.** Gire la pluma blanqueadora hasta que fluya el gel, aplique el gel uniformemente en los dientes superiores e inferiores. Cada vez que use alrededor de 0.5ml-0.7ml.
- 4.** Coloque la boquilla en su boca y muérdala, luego presione botón de encendido para iniciar el tratamiento.
- 5.** La luz LED se apagará automáticamente después de 16 minutos, enjuague la boquilla y la boca con agua y compare sus dientes con papel guía de colores de nuevo para mira cuántas etapas has mejorado.
- 6.** No coma ni beba nada excepto agua en 30 minutos. después del tratamiento.



RANGO DE APLICACIÓN

Manchas dentales de café, tabaco, genética, tetraciclina, colorante de alimentos, envejecimiento y otros factores que pueden causar descoloramiento.

Almacenamiento

Evite la luz solar y manténgalo en un lugar fresco y seco.

Duración

12 meses

NOTA:

1. Forma de carga: utilice el cable USB proporcionado o inalámbrico base de carga.
2. Tiempo de carga: tarda 2 horas en cargarse por completo.
3. Estado de carga: luz roja
Cargado por completo: luz verde

Aviso

- 1.** Seque los dientes y la boquilla por completo, el agua diluirá el gel.
- 2.** Evite aplicar el gel en las encías o los labios. Enjuagar con agua inmediatamente si eso sucede, la sensación de ardor desaparecen en 24 horas.
- 3.** Es normal que sienta una ligera sensibilidad durante el tratamiento, aplicar el gel desensibilizante después del tratamiento; detener el tratamiento cuando sienta dolor severo.
- 4.** Manténgase fuera del alcance de los niños.
- 5.** Busque el consejo de un médico antes de usar si está embarazada, ama mantando alimentarse, tener problemas con las encías o haber tenido una operación oral recientemente.


Precaución

- 1.** No apto para cerámica o dentadura postiza.
- 2.** No es adecuado para la decoloración de los dientes causada por una lesión o medicamento.
- 3.** No apto para tetraciclina severa y dientes cariados.
- 4.** No apto para esmalte defectuoso, dentina ejercida y dientes dañados.
- 5.** No apto para menores de 16 años.

EMPIEZA A BLANQUEAR




Enjuagar la boca con agua

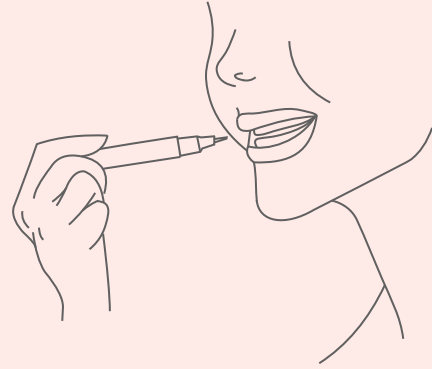

Aplicar el gel en la superficie del diente.




Ponga la boquilla en su boca y muérdelo, luego presiona el botón de encendido para comenzar el tratamiento

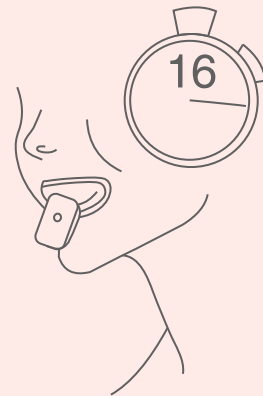

Tratamiento de 16 minutos



Enjuagar la boca con agua

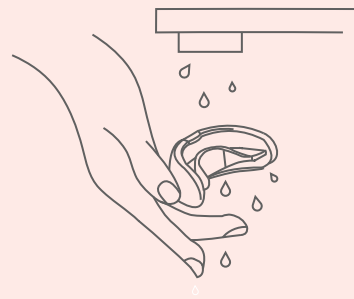

Boquilla de enjuague