

# IPL PREMIUM ICE IDEALSKIN



## Descripción del producto:

---


1. Instrumento de depilación
2. Botón de luz
3. Pantalla
4. Superficie de contacto
5. Botón de congelación
6. Botón de cambio



## Pantalla de visualización:

---


1. Visualización del número residual de flash
2. Indicación de la posición de la marcha
3. Modo de salida de luz continua automática
4. Ventilador

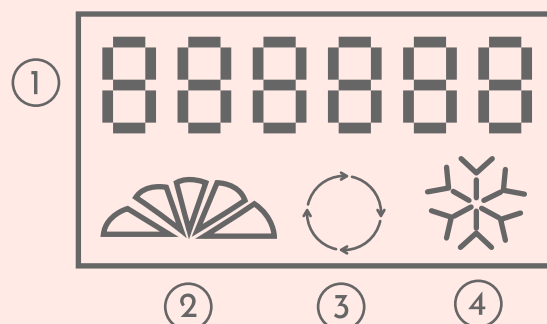

## Léalo atentamente antes de usar

---

-Consulte la página 1 (diagrama de control de color). Para el tipo de piel VI, no utilice este dispositivo, de lo contrario es muy posible que provoque reacciones adversas en la piel.

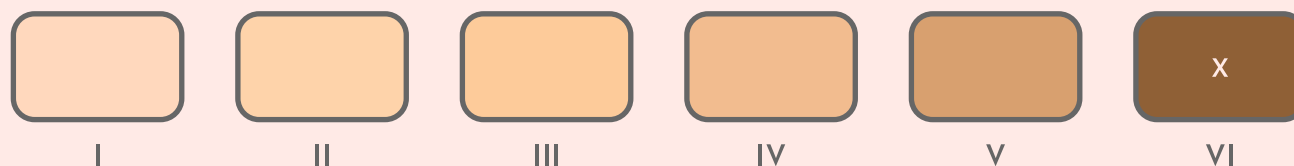

# Cómo utilizar:

---

## 1. Antes de usar

1. Primero elimine el vello de la superficie de la piel. Después de humedecer el cabello, utilice el método de raspado húmedo para realizar el pretratamiento de la piel. Esto permitirá que el cabello debajo de la superficie de la piel absorba la fuente de luz para asegurar el efecto del tratamiento. Si el vello no mide más de 2 mm, no es necesario que se afeite, simplemente utilice el instrumento.
2. Limpie la piel y asegúrese de que no tenga pelo, esté seca y sin sustancias grasas. Está estrictamente prohibido aplicar condensadores, gel de aloe vera y otros productos.

## 2. Pasos

1. Inserte el adaptador, el tubo digital parpadea tres veces y luego muestra APAGADO (pantalla blanca con icono de punto de congelación).
2. Botón de encendido: inserte el adaptador, presione y mantenga presionado el botón de la máquina durante 1.5S, encienda o apague, después de encender, el valor predeterminado es una marcha, presione brevemente para aumentar, 1-2-3-4-5-4 -3-2-1, ciclo por turno.
3. Punto de congelación / luz continua: después del arranque, no hay salida de punto de congelación por defecto (el icono del punto de congelación en la pantalla no se muestra), presione brevemente el botón de punto de congelación para encender o apagar la función de punto de congelación, la congelación El icono de punto en la pantalla está encendido o apagado, presione prolongadamente durante 2 segundos, punto de congelación / botón de luz continua para encender o apagar la función de luz continua, el modo automático de luz continua en la pantalla está encendido o apagado.
4. Tecla de activación: después de encender, presione brevemente la tecla de activación (el cabezal está en estado táctil) para ingresar al modo de emisión de luz manual. iluminado, después de entrar en la luz automáticamente (la cabeza está en el estado táctil), iluminación continua ".

5. Pantalla de almacenamiento de energía (carga y refuerzo): si la energía no está llena, el icono de engranaje parpadea y el icono de engranaje de energía completa se muestra durante mucho tiempo.

6. Función de sincronización: cuando la máquina está encendida y no está en uso (sin iluminación), se apagará automáticamente en cinco minutos. Si se usa durante cinco minutos, será cronometrado por la última iluminación y se apagará automáticamente después de cinco minutos.

## Dos modos

Dos modos de tratamiento que incluyen (presionar y flash) y (deslizar y flash) son convenientes para usar en diferentes partes del cuerpo:

El modo de prensa y flash: es adecuado para áreas pequeñas o curvas, como rodillas y axilas. Solo necesita presionar el botón de flash, luego aparecerá el flash.

El modo de deslizamiento y flash: es conveniente para áreas grandes como piernas. Mantenga presionado el flash y deslice el instrumento a lo largo de la piel en un lado para emitir múltiples destellos de forma continua.

## Tabla de referencia del ciclo terapéutico

1-4 semanas	6-5 semanas	7-8 semanas	Por encima de 8 semanas
2-3 veces por semana	2 veces por semana	1 vez por semana	1-2 veces por semana. Úselo selectivamente según el estado de crecimiento del vello

Un curso de tratamiento depilatorio se refiere a 3 veces de irradiación. Por favor, no ilumine continuamente el mismo lugar tres veces.

La posición de marcha más alta, el mejor efecto. La recomendación es la siguiente: utilice el engranaje 2-4 por primera vez. Luego, elija la marcha 5. Durante el intervalo de tratamiento, examine la velocidad de crecimiento de su cabello. El efecto difiere en varias partes del cuerpo.

## Después de su uso

1. La piel puede estar levemente inflamada, espinosa o caliente. Estas reacciones son completamente inofensivas y pronto desaparecerán.
2. Puede aplicar con seguridad loción, crema, desodorante, humectante o cosméticos en el área tratada. Si aparece algún hormigueo o enrojecimiento después del tratamiento, espere a que desaparezcan estas condiciones antes de aplicar cualquier otro producto en su piel.

## Conservación limpia

1. Después de su uso, apague la alimentación y desconecte el enchufe para enfriar el instrumento.
2. Utilice un paño húmedo en las siguientes partes - Filtro - Superficie de la piel.
3. Mantenga el instrumento en un lugar seco y sin polvo con una temperatura que oscile entre 0 y 60 C.

## El efecto curativo es notable

Los resultados clínicamente probados muestran hasta un 90% de reducción del vello después de 4-7 veces de tratamiento y el 98% de los clientes están satisfechos con los resultados del tratamiento después de un uso prolongado. La longitud de onda superior a 510 nm puede cerrar los folículos pilosos e inhibir la regeneración del cabello. Así que puedes despedirte de la depilación repetida.

## ¿Cuándo verá los resultados?

Con solo 4-5 sesiones de autotratamiento, la mayoría de los usuarios pueden experimentar una disminución visual del cabello que es comparable a los resultados obtenidos mediante procedimientos láser administrados por profesionales. Los resultados óptimos requieren al menos un uso continuado durante 6 meses.

## ¿Dónde puedes usarlo?

1. Puedes eliminar el vello de los labios, mentón, patillas, axilas, brazos, piernas, barriga, bikini y partes íntimas.
2. Se sugiere el nivel 1 por primera vez. Después de eso, puede ajustarse a la intensidad que puede soportar.

## ¿Quién puede usarlo?

No utilice este instrumento en pieles naturalmente oscuras o recién bronceadas. Esta herramienta de belleza es ideal para usar con tonos de piel más claros y cabello de castaño a negro.

No se recomiendan los pelos blancos, grises, rojos y rubios.

## ¿Cuáles son las precauciones a la hora de usar?

Mantenga el cable de alimentación enchufado; no desconecte el enchufe durante el uso. No es necesario cargar el dispositivo por adelantado, solo utilícelo directamente después de conectar el cable de alimentación.

## Consejos para después del tratamiento

1. Utilice un humectante para calmar su piel después del tratamiento.
2. Evite los rayos ultravioleta dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento.

## Contraindicaciones:

No para mujeres embarazadas o en período de lactancia, o durante el período menstrual.

No para personas con diátesis cicatricial.

No para personas con antecedentes de fotosensibilizaciones o diabetes.

No para individuos que han tomado un tratamiento con aceites esenciales al mismo tiempo.

No para personas que hayan tomado aspirina e inmunosupresores.

No para personas que han estado expuestas a la luz solar intensa en las últimas 2 semanas.

No para áreas sensibles, como mucosas, etc. y posiciones privadas, como párpado superior, labio, pezón y vagina, etc.

No para personas con hirsutismo y otras enfermedades que pueden desencadenar complicaciones.